



# DREAM BIG.

**EOS Relax**  
Montage- und Bedienungsanleitung  
Aufrichter-Set



Gültig ab 03/2018

*philrouge*  
Schweizer Schlafkompetenz



Öffnen Sie die Verpackung nicht einem Teppichmesser, um Beschädigungen Ihres Polsterbetts zu vermeiden.

To avoid damaging your upholstered bed, do not open the package with a box knife.

N'ouvrez pas l'emballage avec un cutter afin d'éviter toute détérioration de votre sommier tapissier.



Nicht auf die Eckenstellen oder fallen lassen.  
Do not stand on the corners or allow to fall.  
Ne pas poser sur les coins, ni laisser tomber.



Entstandene Beschädigungen durch Nichtbeachtung obiger Hinweise führen zum Verlust der Garantie.

Any damage resulting from non-compliance with the above instructions will lead to loss of warranty rights.

Les détérioration résultat du non-respect des instruction sus-mentionnées rendent la garantie caduque.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Halterung für Zubehörteile .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Vorbereitung Zubehörhalter für die rechte Seite .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Vorbereitung Zubehörhalter für die linke Seite .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Montage der Zubehörhalterung .....</b>	<b>9</b>
4.1. Aufrichter .....	10
4.2. Infusionsständer .....	12

## Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen, indem Sie sich für ein Philrouge - Produkt aus dem Hause DOC entschieden haben.

Bevor unsere Produkte unser Haus verlassen, werden Sie sorgfältig geprüft und einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte dennoch ein Problem auftauchen oder Fragen zum Produkt, bitten wir Sie, sich an Ihren zuständigen Fachhändler zu wenden.

Um sicherzustellen, dass Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Boxspring-Bett haben und die Funktionalität gewährleistet ist, bitten wir Sie, die nachfolgenden Instruktionen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

DOC kann nicht für Schäden am Bett oder Folgen für den Nutzer haftbar gemacht werden, welche aus unsachgemässer Benutzung und /oder nicht korrekter Pflege, Wartung und Instandhaltung resultieren.

DOC behält sich das Recht, technischer Änderungen am Produkt, als auch an der vorliegenden Bedienungsanleitung, vor.



Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Montage und Benutzung Ihres neuen Betts. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Anleitung bei der Montage zu benutzen.

**Bitte diese Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren!**

**Achtung:** Bitte beachten Sie übergeordnete Dokumentationen und Sicherheitshinweise zum Hauptprodukt. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Abläufe können dadurch beeinflusst werden.

Wenn das Bett beschädigt wird, weil die verschiedenen, in dieser Anleitung beschriebenen Montageschritte nicht richtig beachtet wurden, führt dies zum Verlust der Garantie.

**Die Originalsprache dieser Montage- und Bedienungsanleitung ist Deutsch.**

## 1. Halterung für Zubehörteile

EOS Relax Boxspring kann zusätzlich ergänzt werden mit folgendem Zubehör:

- Halterung für Zubehörteile
- Aufrichter
- Infusionsständer


Diese können sowohl an die rechte, als auch die linke Bettseite, am Kopfende montiert werden.

Die Halterung ist für die Aufnahme von Aufrichter und Infusionsständer vorgesehen.


Zunächst muss der Positionierungsstift, zur Begrenzung des Schwenkwinkels des Aufrichters, eingesetzt werden.

Die Position des Positionierungsstifts ist abhängig davon, ob der Zubehörhalter links oder rechts am Bett montiert wird. Die linke und rechte Bettseite definiert sich, wie unter Figur 3 beschrieben.

## 2. Vorbereitung Zubehörhalter für die rechte Seite

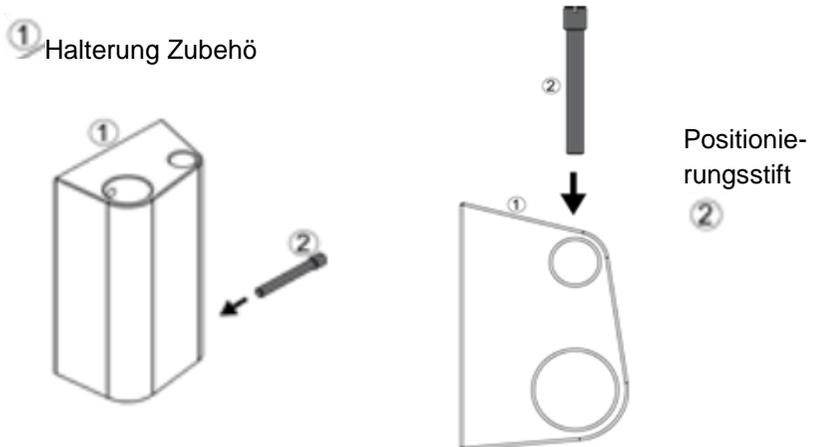


### 3. Vorbereitung Zubehörhalter für die linke Seite

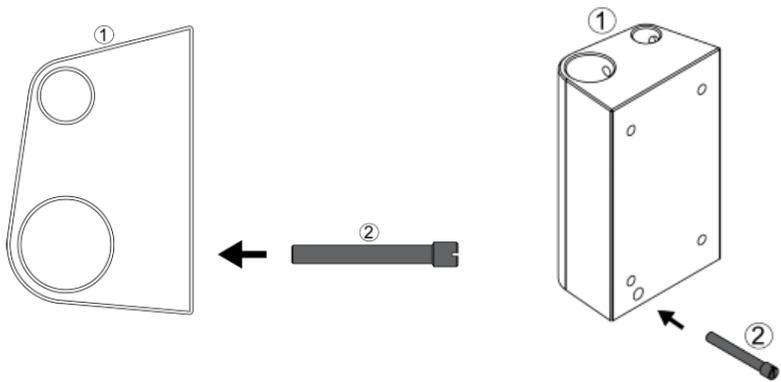


Der Zubehörhalter wird durch die Bettseite hindurch verschraubt. Beidseitig an den Bettseiten befinden sich Vorbohrungen. Mit einer spitzen Nadel die Polsterung an der Stelle der Vorbohrungen durchstechen. Auf der Innenseite der Box sind die Stellen der Vorbohrungen durch quadratische Abheftungen mit Klammern ersichtlic.





Vorbohrungen  
auf der linken  
Bettseite

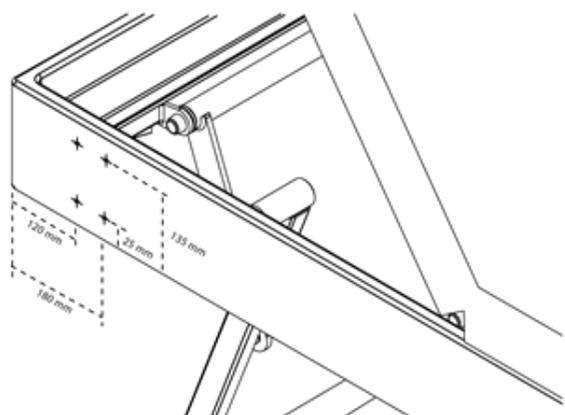


Vorbohrungen auf  
der rechten Bett-  
seite

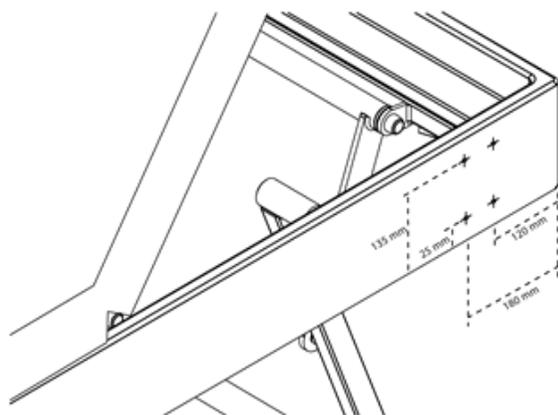

## 4. Montage der Zubehörhalterung

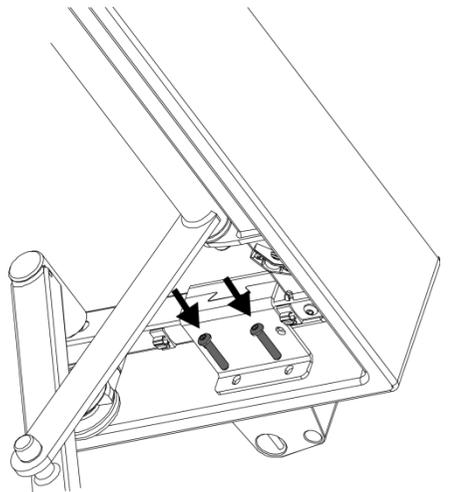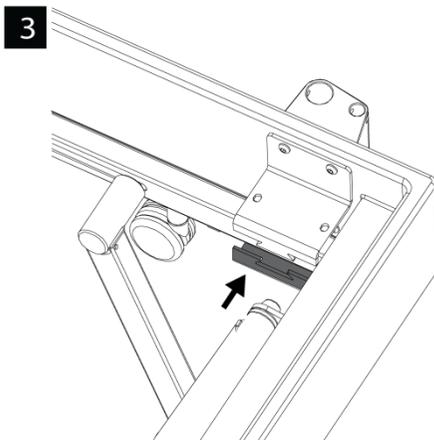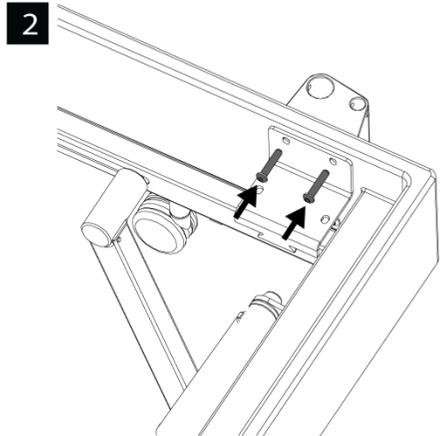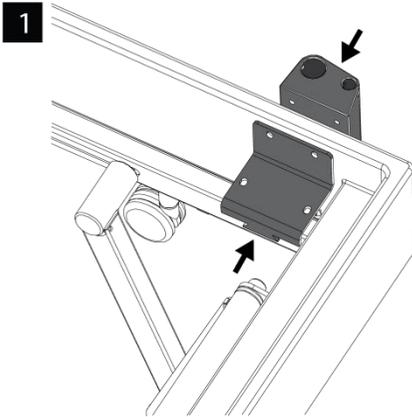


4

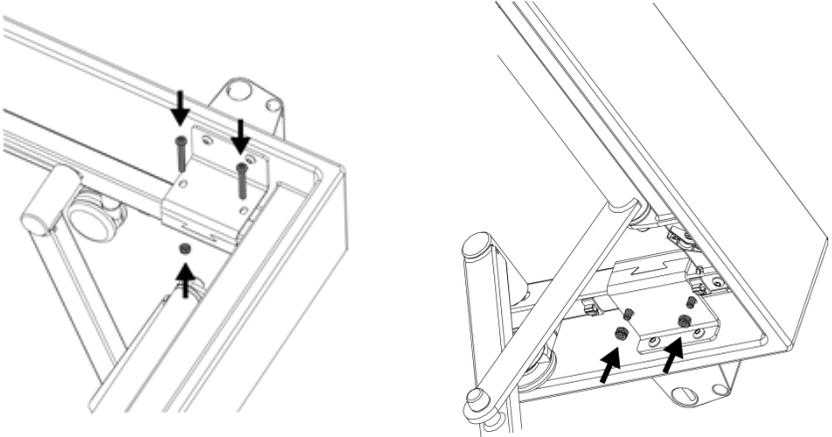

#### 4.1. Aufrichter

Der Aufrichter darf nur, im dafür vorgesehen Zubehöralter, angebracht werden. Bitte stellen Sie sicher, dass der Aufrichter vollständig in den Zubehöralter eingesteckt ist.

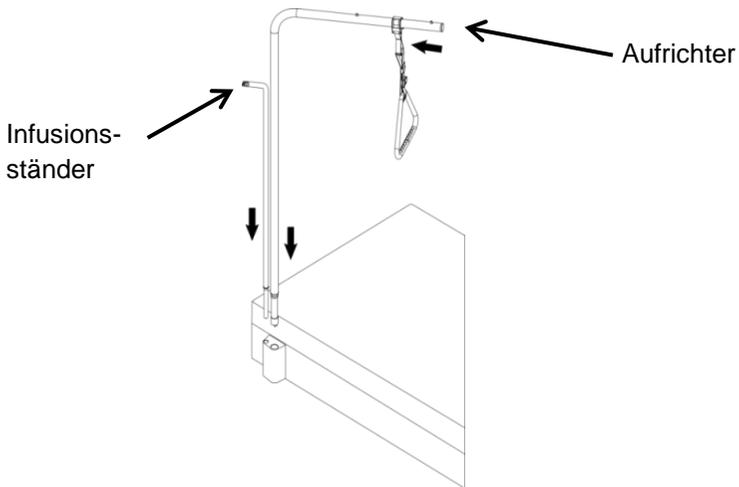


Der Aufrichter ist um 90° drehbar, er kann nicht über die Bettseite hinaus schwenken.

Berücksichtigen Sie ausreichend Sicherheitsreserve in der Belastung, die maximale statische Belastung beträgt 75 kg.



**Der Aufrichter ist nicht für Übungen zu Rehabilitationszwecken geeignet!**

Es wird empfohlen, den Handgriff des Aufrichters regelmässig zu überprüfen und alle 4 - 5 Jahre zu erneuern.

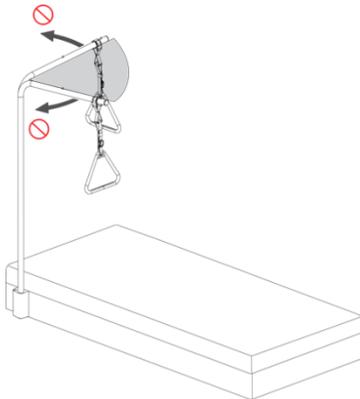

Äussere Begrenzungen des Aufrichters

Gewicht: 4,9 kg  
Max. statische Belastung: 75 kg



Falls das Bett mit Aufrichter und/oder Infusionsständer ausgestattet ist, sind die umgebenden Bereiche sorgsam zu beobachten, vor allem dann, wenn das Bett verstellt und verschoben wird. Damit verhindern Sie, dass die Betausstattung und Zubehörteile beschädigt werden. Stellen Sie immer sicher, dass niemand eingeklemmt werden kann.

## 4.2. Infusionsständer

Der Infusionsständer ist um 360° drehbar. Er ist mit einem Haken zum Einhängen von Infusionsflaschen versehen.



Gewicht:	0,75 kg
Max. Belastung des Hakens:	4 kg
Max. Belastung des Infusionsständers:	8 kg